

Schnelltests in der Drogendetektion



Drogenkonsum und -missbrauch bedrohen zunehmend unsere Gesellschaft. Wir alle sind aufgerufen, dem Drogenmissbrauch entgegenzuwirken. Mit Schnelltests, die einfach in der Anwendung und verlässlich im Resultat sind, haben wir für jeden Anwendungsbereich den richtigen Test.

Drogentests



S DrugWipe 6S
Speicheltest



Einsatzbereich: Verkehrskontrolle

- Schnelle und einfache Probenahme
- Sichere Testergebnisse auch bei trockenem Mund
- Testet unmittelbare Beeinflussung (nicht Langzeitkonsum)
- einfache Anwendung
- Ergebnisanzeige nach 3-8 Minuten



Als 6er-Test erhältlich

A DrugWipe A
Oberflächen-, Schweiß-
und Speicheltest



**Einsatzbereich: Zoll, Grenzschutz,
Arbeitssicherheit**

- Der richtige Test für jede Situation
- Testet Speichel, Schweiß und Oberflächen
- Gezieltes Testen bei Drogenverdacht
- Ergebnisanzeige nach 3-8 Minuten



Als 1er-, 2er- oder 5er-Test
erhältlich

F DrugWipe F
Oberflächentest



**Einsatzbereich: Unfallaufnahme,
Strafvollzug, Arbeitssicherheit**

- Sicherer Nachweis von unsichtbaren Spuren auf allen Oberflächen – auch von länger zurückliegender Kontamination
- Für alle, die keine Beprobung an Personen vornehmen dürfen
- Testen ohne direkten Personenkontakt
- Ergebnisanzeige nach 3-8 Minuten



Als 5er-Test erhältlich

Drogennachweis

Im Speichel ist ein aktueller Drogenkonsum während eines gewissen Zeitfensters nachweisbar. Dies, weil ein direkter Zusammenhang der Drogenkonzentration im Speichel und derjenigen im Blut besteht. Der Speicheltest ist durch seine einfache Probegewinnung überall diskret anwendbar. Die Probeentnahme erfolgt auf der Zunge über das Wischteil.

Drogensubstanzen im Speichel sind nur über Stunden nachweisbar. Gerade diese Symptomatik bewirkt aber, dass die Korrelation mit der Wirkung relativ genau übereinstimmt. Werden im Speichel Drogen aufgespürt, so kann daraus der Schluss gezogen werden, dass ein aktueller Konsum vorliegt.

DS **Drogentest Substanzen**
Identifikation verdächtiger
Substanzen



**Einsatzbereich: Verkehrskontrolle,
Strafvollzug, Institute**

Häufig stossen Beamte im Einsatz auf verdächtige Substanzen, deren Zusammensetzung unbekannt ist.

Mit unseren Substanztests können Pulver, Tabletten oder Flüssigkeiten überprüft und identifiziert werden.

Der praktische Ein-Schritt-Test liefert schnelle, einfache und verlässliche Ergebnisse innerhalb von wenigen Minuten.

Als 1er-Ampulle erhältlich

RF **Auslesegerät**
RSS Flash für die Urin
Drogentests



**Einsatzbereich: Verkehrskontrolle,
Strafvollzug, Spitäler, Institute**

Der RSS Flash ermöglicht die blitzschnelle Auswertung der bewährten Urin-Schnelltests direkt in Ihrem Einsatzgebiet.

Die handliche Grösse des Gerätes und die einfache Bedienung der Software gewährleistet dabei eine sehr hohe Benutzerfreundlichkeit.

Aufgrund des praktischen Magnet-Adaptersystems ist die Auswertung von Einzeltests, Multikassetten tests und sogar von Cup-Tests möglich. Dieses robuste Leichtgewicht kann überall eingesetzt werden.

Testen, Interpretieren,
Dokumentieren

WA **Auslesegerät**
WipeAlyser für den
DrugWipe 6S



Einsatzbereich: Verkehrskontrolle

Robust, stossfest und spritzwassergeschützt ist der WipeAlyser für den Ausseneinsatz optimal geeignet. Intuitive und schnelle Bedienung sowie ein ergonomisches Design sind weitere Kennzeichen dieser neuen Generation eines mobilen Analysegerätes.

Der WipeAlyser garantiert durch die elektronische Auswertung des DrugWipe jederzeit ein objektives Ergebnis. In Ergänzung zum Testergebnis werden GPS-Position, Zeitpunkt der Kontrolle, Name des Probanden und weitere Personendaten gespeichert. Der WipeAlyser verfügt über einen integrierten Drucker. Das Protokoll des Schnelltests mit allen zuvor erfassten Daten lässt sich sofort in Belegform ausdrucken – beispielsweise um dieses dem Probanden zu zeigen und unterschreiben zu lassen.

Testen, Interpretieren,
Dokumentieren



Abk.	Substanz	6S	1A	2A	5A	5F	UP	DS
AMP	Amphetamine	•	•	•	•	•	•	•
BAR	Barbiturate						•	•
BUP	Buprenorphin						•	•
BZD	Benzodiazepine	•					•	•
COC	Kokain	•	•	•	•	•	•	•
CREA	Kreatinin						•	•
EDDP	EDDP						•	•
FYL	Fentanyl						•	•
KET	Ketamin						•	•
LSD	Lysergsäurediethylamid / LSD						•	•
MDA	Methylenedioxyamphetamin						•	•
MDMA	Ecstasy						•	•
MDPV	Methylenedioxypropylamphetamin						•	•
MES	Mescaline						•	•
MET	Methamphetamine	•	•	•	•	•	•	•
MOR/OPI	Opiate / Morphine	•	•	•	•	•	•	•
MPD	Methylphenidat						•	•
MQL	Methaqualon						•	•
MTD	Methadon						•	•
OCY	Oxycodon						•	•
PCM	Paracetamol						•	•
PCP	Phencyclidine						•	•
PPX	Propoxyphen						•	•
SPICE	Spice / K2						•	•
TCA	Trizykl. Antidepressiva						•	•
THC	Cannabinoide /Cannabis	•	•	•	•	•	•	•
TML	Tramadol						•	•
TZD	Trazodon						•	•
ZAL	Zaleplon						•	•
ZOL	Zolpidem						•	•

UP Drogentest Urin

Einzel- und Mehrfachtest



Einsatzbereich: Strafvollzug, Spitäler, Institute

Für den Nachweis von Drogenkonsum im Urin umfasst unser Sortiment mehr als 30 verschiedene Parameter. Von Standardparameter bis hin zu Verfälschungstests. Mit einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten können wir auch Ihren Bedarf abdecken.

- Eintauchtest
- Tropftest/Pipettiertest
- Bechertest
- Verfälschungstest

Als Einzel- und Mehrfachtest erhältlich





Drogentests

Ihr führender Partner, wenn es um Atemalkohol- und Drogendetektion geht.

Alkohol- und Drogentests müssen schnell und einfach durchzuführen sein, aber auch präzise Ergebnisse liefern. Unsere Erfahrung und unser Know-how haben uns zu einem der wichtigsten Schweizer Anbieter von Schnelltests für den Alkohol- und Drogennachweis in Speichel, Schweiß und Urin gemacht. Labtec Safety liefert damit einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen Drogen- und Alkoholmissbrauch, zur Suchtprävention und Verkehrssicherheit.




Atemalkoholtestgeräte

Besuchen Sie unseren Onlineshop
www.labtec-safety.ch



- METAS zertifizierte Polizeigeräte
- Drogenschnelltest Speichel
- Beweissichere Atemalkoholmessung

- Drogenschnelltest Urin
- Zubehör und Verbrauchsmaterial

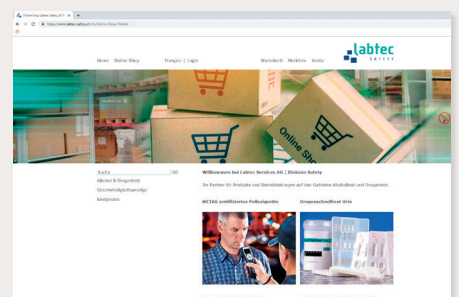



Weil für die Verkehrssicherheit nur das Beste gut genug ist.

Zu hohe Geschwindigkeit kann, wie auch Alkohol oder Drogen am Steuer, leicht zu Unfällen mit schwerwiegenden Folgen führen. Wir unterstützen mit unserem Angebot im Bereich Verkehrssicherheit sowohl die Prävention – zum Beispiel bezüglich Arbeitssicherheit – wie auch die Therapie und bieten Schulungen zur Suchtproblematik an.

Sprechen Sie mit uns über massgeschneiderte Schulungen für Ihre Mitarbeitenden oder über individuelle Wartungsverträge für die bei Ihnen im Einsatz stehenden Geräte.

Mit dem Know-how und der Erfahrung unserer Serviceorganisation und der hauseigenen Werkstatt (inklusive Kalibrierungslabor) stehen wir Ihnen immer dann zur Seite, wenn Sie es benötigen. Dafür halten wir für Sie das erforderliche Material sowie Ersatzteile im eigenen Lager vorrätig, damit wir jederzeit rasch darauf zugreifen können.

Sie haben die Wahl. Wir haben den Service.

• Schulung • Unterhalt • Service • Reparaturen • Wartungsverträge